

MOVIX SERIES DREAM

MOVIX SERIES DREAM



BIEN VOIR POUR MIEUX PRÉVOIR

MOVIX SERIES DREAM

VUE D'ENSEMBLE

Entrez dans la nouvelle dimension de la radiologie portable avec un mobile **Movix Series DReam**.

STEPHANIX possède la gamme de mobiles numériques la plus large du marché. Les **Movix Series DReam** peuvent être équipés de générateurs haute fréquence de 20 kW à 50 kW et d'une large gamme de capteurs plans portables.

Une console intégrée permet l'enregistrement des données patient, le choix des paramètres d'acquisition, l'aperçu instantané du cliché, le traitement immédiat des images et l'envoi des clichés DICOM sur le réseau.

Les **capteurs plans portables** se manipulent comme les plaques phosphore et se disposent dans un espace de rangement intégré au mobile.

Les **MOVIX Series DReam** s'adaptent aux unités de soins intensifs, d'urgences, aux clichés pédiatriques et au lit du patient, afin que la radiologie numérique soit toujours à vos côtés.



02

LIBERTÉ DE MOUVEMENTS

Les mobiles motorisés **Movix series DReam** offrent une efficacité et une facilité d'utilisation incomparables.

La vitesse du mobile s'ajuste en fonction de la pression exercée sur la poignée autorisant les déplacements jusqu'à 5 km/h.

D'une grande réactivité, le mobile s'arrête automatiquement dès que la poignée est relâchée.

La compacité du mobile permet un positionnement aisé dans toutes les situations.

Son bras télescopique de 125 cm simplifie la prise de clichés sur brancard.

Les rotations de colonne, du tube et du collimateur assurent un positionnement optimal pour tous les examens.



03



MOVIX SERIES DREAM



GARDEZ LE CONTROLE

D'une polyvalence exceptionnelle, les **Movix Series DReam** sont les outils idéaux pour votre service de radiologie.

Les commandes secondaires de motorisation situées sur le tube permettent d'ajuster le placement du mobile sans retourner à la console.

Conçus pour s'adapter aux exigences de votre service de radiologie, les **Movix Series DReam** sont équipés de roues porteuses de grand diamètre permettant le franchissement d'obstacles, jusqu'à 6 cm, comme un seuil d'ascenseur.



PROTECTION OPTIMALE

La protection étant notre priorité, les **Movix Series DReam** disposent des caractéristiques de sécurité avancées.

Une clé verrouille le système tout en autorisant la charge des batteries.

La dose est indiquée pour chaque cliché et la valeur du Produit Dose Surface (PDS) est intégrée au champ DICOM approprié.

Un système de sécurité situé sur l'avant stoppe le déplacement du mobile dès qu'il entre en collision avec un obstacle.

La télécommande infrarouge* offre une protection optimale de l'utilisateur.

* option



MOVIX SERIES DREAM

UN TEMPS D'AVANCE

Intuitive, l'interface tactile de la console d'acquisition possède un nombre illimité de protocoles anatomiques.

La visualisation instantanée des images sur l'écran tactile de grande taille donne la possibilité aux utilisateurs de valider le cliché avant son envoi vers les consoles de diagnostic ou vers le reprographe.

La communication est un élément indispensable pour l'amélioration et le partage de l'information c'est pourquoi les **Movix Series DReam** sont équipés :

- de supports USB
- d'un graveur CD / DVD
- de sorties Ethernet
- d'une borne wifi.

* option

L'intégration des capteurs plans portables offre une qualité d'image incomparable à faible dose.

La large gamme de capteurs plans associée aux **Movix Series DReam** vous propose un choix incomparable de solutions pour une flexibilité optimale :

- Solution polyvalente avec les capteurs plans portables et détachables de différentes tailles.
- Solution wifi pour une utilisation en toute liberté grâce aux capteurs plans légers et compacts.



GESTION DE L'IMAGE

Avec l'arrivée du numérique, la gestion de l'information joue un rôle clé. Les solutions STEPHANIX permettent de maîtriser les données patient, de l'acquisition de l'image jusqu'au diagnostic et à l'archivage.


La console **DReam View*** est une station multi-modalités qui inclut des outils de mesures pour un diagnostic complet.

En fonction de la configuration de votre service, une console **DReam View** peut être associée au **Movix Series DReam**.

* option



Modalité DX

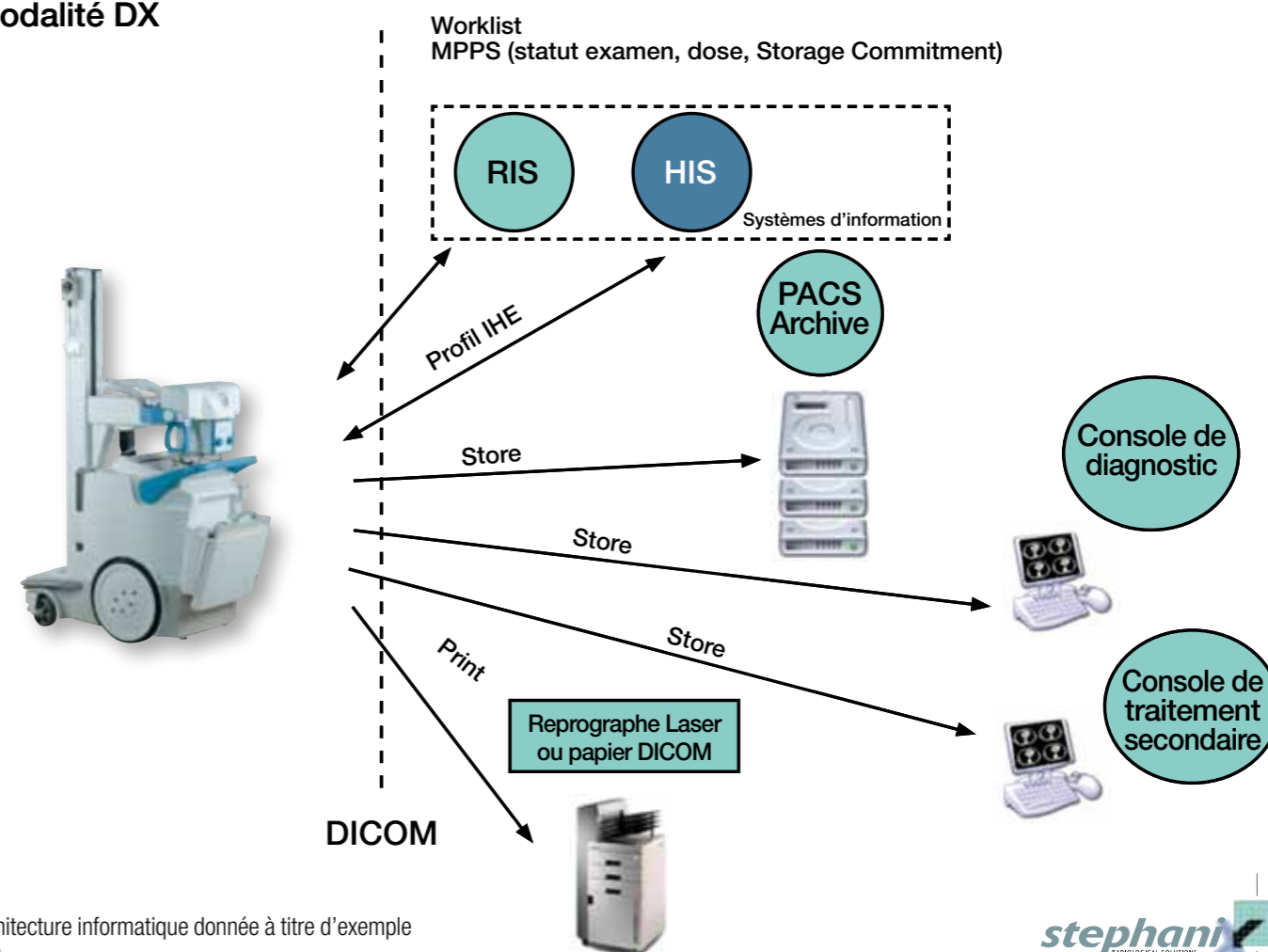

Architecture informatique donnée à titre d'exemple

Toutes les solutions numériques de nouvelle génération
capteurs plans intégrés ou portables,
wifi, filaires et dynamiques.



STATIF PRO DREAM
Radiographie numérique



Siège social

Rue Jean Moulin - ZI du Bayon
42150 La Ricamarie - FRANCE
Tel : + 33 4 77 47 81 60
contact@stephanix.com



www.stephanix.com

MOVIX SERIES DREAM

Service export

15, rue du Saule Trapu
91882 Massy cedex - FRANCE
Tel : + 33 1 60 13 56 25
Fax : + 33 4 77 37 55 19