

MOVIX 4/8 DREAM

MOVIX 4/8 DREAM



BIEN VOIR POUR MIEUX PRÉVOIR

MOVIX 4/8 DREAM

VUE D'ENSEMBLE

Le **MOVIX 4/8 DReam** est un mobile de radiographie numérique compact de seulement 94 kg, équipé d'un générateur haute fréquence de 4 kW ou 8 kW (125kV, 100 mA, 250 mAs) et d'une large gamme de capteurs plans portables.

La console d'acquisition intégrée permet l'enregistrement des données patient, le choix des paramètres d'acquisition, l'aperçu instantané du cliché, le traitement immédiat des images et l'envoi des clichés DICOM sur le réseau.

Les **capteurs plans portables** se manipulent comme les plaques phosphore et se disposent dans un espace de rangement intégré au mobile.

Le **MOVIX 4/8 DReam** est particulièrement adapté aux clichés au lit du patient, à l'extérieur et aux examens hors des sites médicaux.



02

COMPACT

Avec ses dimensions compactes (715 x 670 x 1410 mm), le **MOVIX 4/8 DReam** se transporte facilement dans un véhicule ou se plie dans sa caisse de transport. Sur site, il se déploie en 2 minutes et le cliché est visible en 3 secondes.

D'une grande polyvalence, le **MOVIX 4/8 DReam** permet de réaliser l'ensemble des procédures radiographiques en toute simplicité. Le **MOVIX 4/8 DReam** vous ouvre un nouvel horizon en radiologie mobile.



EN SEULEMENT 3 ÉTAPES : LE MOBILE EST PRÊT



03



MOVIX 4/8 DREAM



ERGONOMIE

La conception du **MOVIX 4/8 DREAM** avec ses poignées situées de chaque côté du tube facilitent son positionnement pour les clichés au lit du patient ou sur brancard et pour les patients polytraumatisés.

La nouvelle fourche avant améliore la manoeuvrabilité du **MOVIX 4/8 DREAM** dans les espaces difficiles.

Les larges roues* du **MOVIX 4/8 DREAM** ont été conçues pour des utilisations opérationnelles : interventions militaires, événements sportifs, catastrophes naturelles et situations d'urgence.

* option



UN TEMPS D'AVANCE

Intuitive, l'interface tactile de la console d'acquisition possède un nombre illimité de protocoles anatomiques.

La visualisation instantanée des images sur l'écran tactile de grande taille donne la possibilité aux utilisateurs de valider le cliché avant son envoi vers les consoles de diagnostic ou vers le reprographe.

La communication est un élément indispensable pour l'amélioration et le partage de l'information c'est pourquoi le **MOVIX 4/8 DREAM** est équipé :

- de supports USB
- d'un graveur CD / DVD
- de sorties Ethernet
- d'une borne wifi.

L'intégration des capteurs plans portables offre une qualité d'image incomparable à faible dose. La large gamme de capteurs plans associée aux **MOVIX 4/8 DREAM** vous propose un choix incomparable de solutions pour une flexibilité optimale :

- Solution polyvalente avec les capteurs plans portables et détachables de différentes tailles.
- Solution wifi pour une utilisation en toute liberté grâce aux capteurs plans légers et compacts.



MOVIX 4/8 DREAM

GESTION DE L'IMAGE


Avec l'arrivée du numérique, la gestion de l'information joue un rôle clé. Les solutions **STEPHANIX** permettent de maîtriser les données patient, de l'acquisition de l'image jusqu'au diagnostic et à l'archivage.

La console **DReam View*** est une station multi-modalités qui inclut des outils de mesures pour un diagnostic complet. En fonction de la configuration de votre service, une console **DReam View*** peut être associée au **MOVIX 4/8 DReam**.

* option



Modalité DX

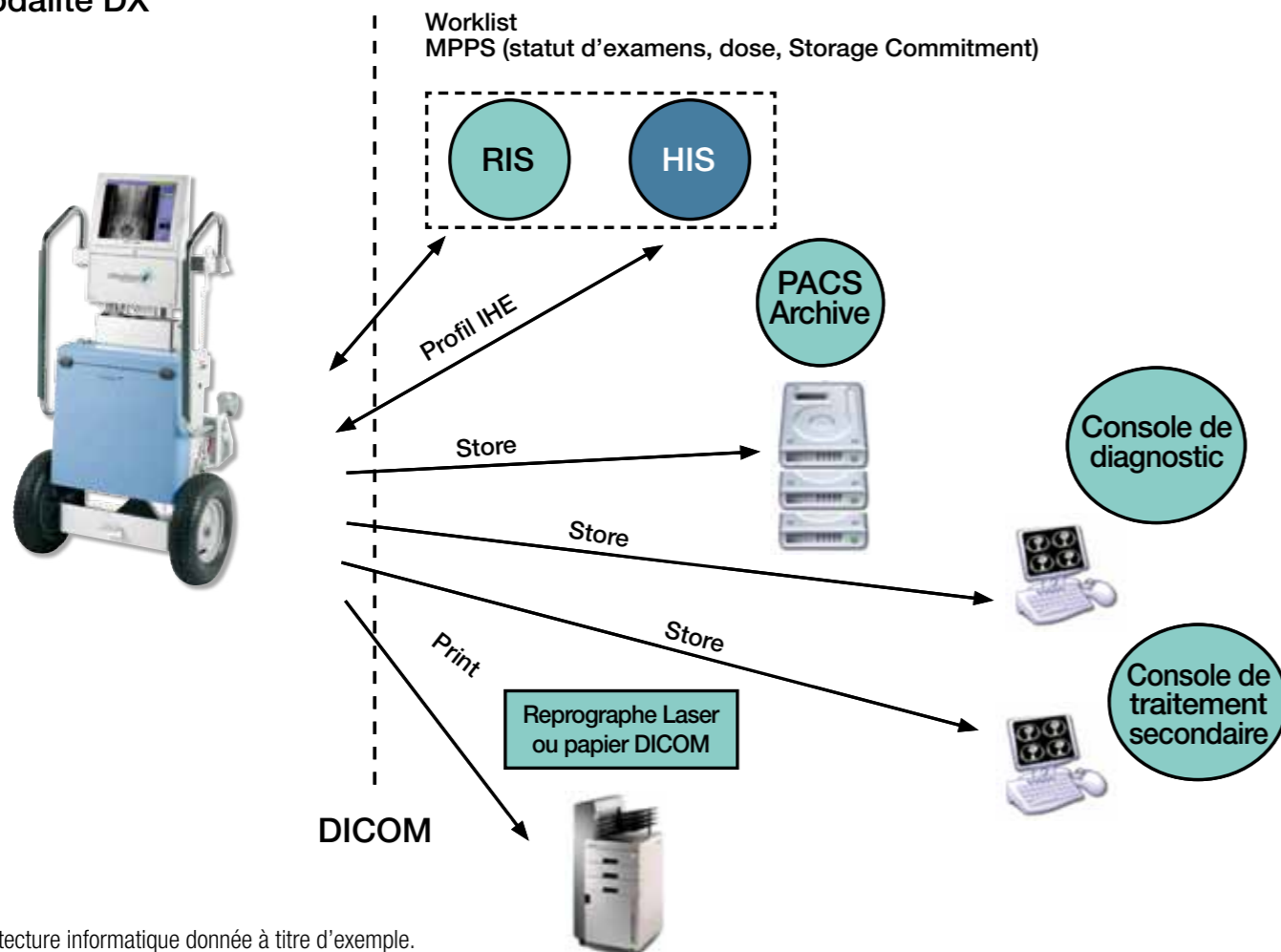

Architecture informatique donnée à titre d'exemple.

APPLICATIONS

Lorsque la sécurité est la priorité, nous vous apportons notre soutien pour soutenir vos projets. Le **MOVIX 4/8 DReam** s'adapte parfaitement aux situations telles que :

- **Militaire ou scientifique**
Des caisses type OTAN permettent d'envoyer le **MOVIX 4/8 DReam** sur des opérations militaires. Sa robustesse le rend particulièrement adapté à des opérations de terrain.
- **Extérieure ou catastrophe naturelle**
Rapide et compact, le **MOVIX 4/8 DReam** n'a besoin que d'une prise de 230 V pour délivrer une qualité image incomparable en toute circonstance.



Toutes les solutions numériques de nouvelle génération
capteurs plans intégrés ou portables,
wifi, filaires et dynamiques.



STATIF PRO DREAM
Radiographie numérique



Siège social

Rue Jean Moulin - ZI du Bayon
42150 La Ricamarie - FRANCE
Tel : + 33 4 77 47 81 60
contact@stephanix.com



www.stephanix.com

MOVIX 4/8 DREAM

Service export

15, rue du Saule Trapu
91882 Massy cedex - FRANCE
Tel : + 33 1 60 13 56 25
Fax : + 33 4 77 37 55 19